

# DELTA VEN® NEO DELTA VEN®

**Catetere Intravenoso Periferico in FEP e PUR**



 **DELTA MED**  
MEDICAL DEVICES  
*Solutions for Health*


PART OF



**NUMANTEC**  
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

# CATETERE INTRA VENOSO PERIFERICO

DELTA VEN® NEO DELTA VEN®

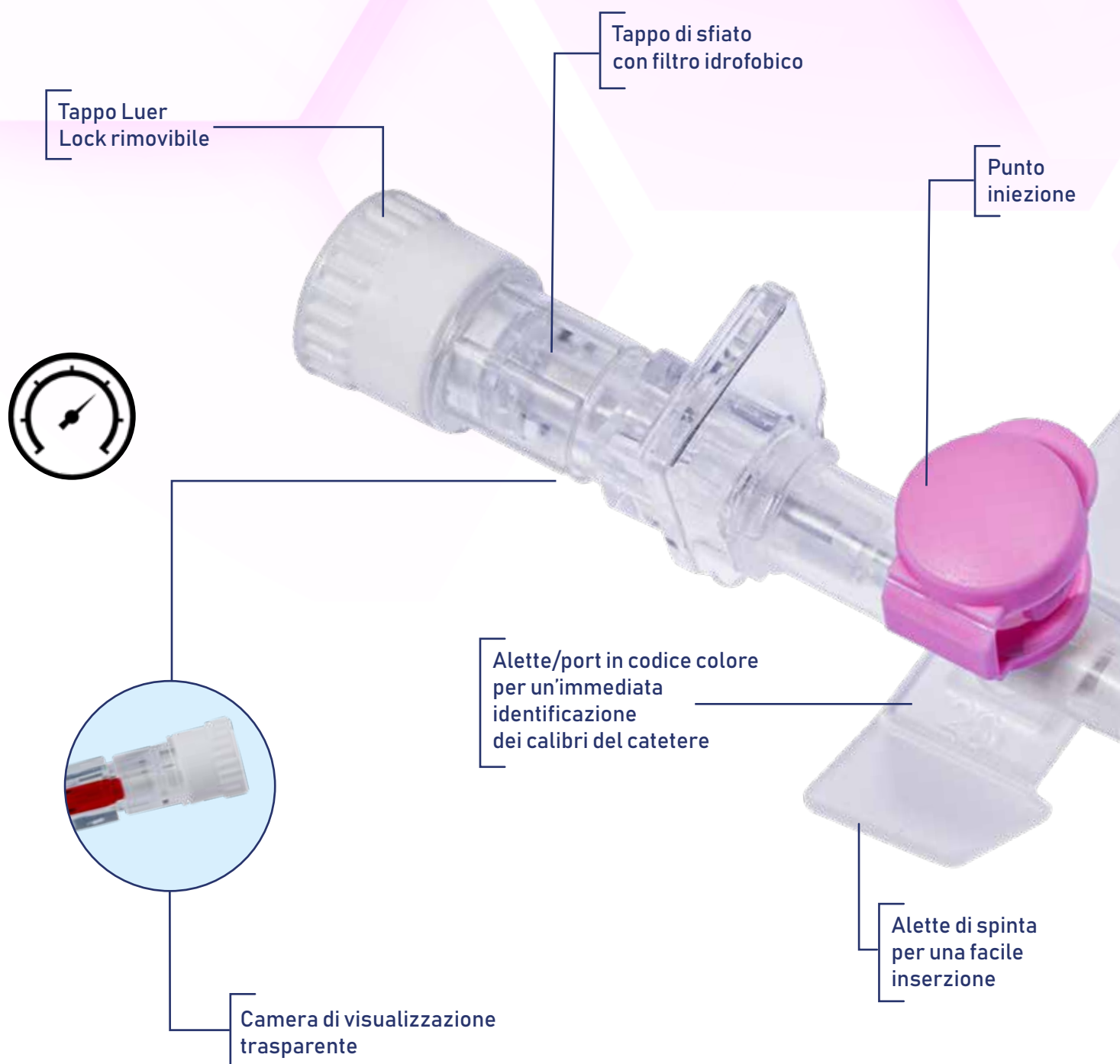

**La divisione IVC produce cannule endovenose e dispositivi medici di alta qualità, garantendo la massima sicurezza e comfort sia per i pazienti che per le strutture sanitarie.**


## Disponibile in 3 configurazioni



Monovia



Monovia con alette

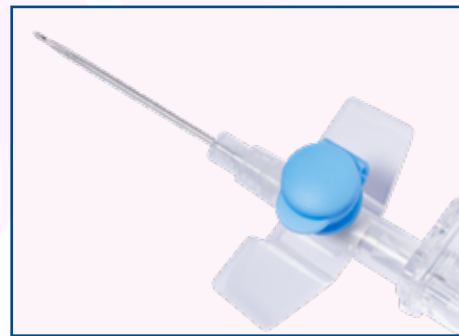


Due vie con alette

### Materiale cannula:


- trasparente
- flessibile
- anti kinking
- visibile ai raggi X (3 linee radiopache)

Disponibile in Poliuretano (PUR), sensibile al calore risulta essere più morbido in vena; e Teflon (FEP)

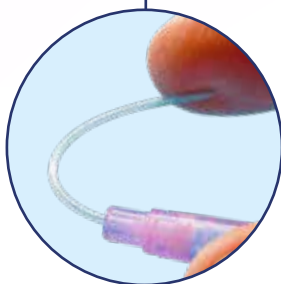

Hub trasparente per una facile visualizzazione del ritorno ematico

Ago a triplice affilatura per un'inserzione atraumatica

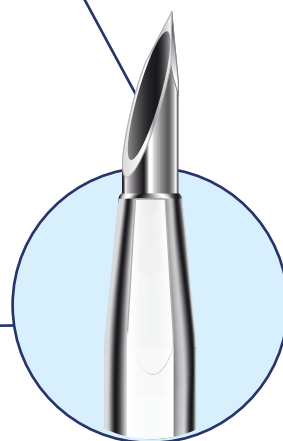

### Vantaggi principali:

- **ALTA PRESSIONE**, fino a 325PSI (non usare alta pressione con la variante 26G)
- Ampia gamma di calibri e configurazioni

# CATETERE INTRAVENOSO PERIFERICO



Neo Delta Ven 2 / Delta Ven 2 - Due vie con alette

| NEO DELTA VEN 2 | DELTA VEN 2 | DESCRIZIONE        | GAUGE | LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch) | Ø EST. CATETERE (MM) | Ø INT. CATETERE (mm) | CAPACITÀ (ml/min) | PZ. SCATOLA/ CARTONE |
|-----------------|-------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3104022         | 3103222     | Due vie con alette | 26    | 19 mm (3/4")                   | 0,64                 | 0,45                 | 19                | 50/500               |
| 3113122         | 3111522     | Due vie con alette | 24    | 19 mm (3/4")                   | 0,74                 | 0,55                 | 29                | 50/500               |
| 3123122         | 3121522     | Due vie con alette | 22    | 25 mm (1")                     | 0,9                  | 0,65                 | 42                | 50/500               |
| 3133122         | 3131522     | Due vie con alette | 20    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1                    | 0,75                 | 59                | 50/500               |
| 3183122         | 3181522     | Due vie con alette | 18    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 103               | 50/500               |
| 3143122         | 3141522     | Due vie con alette | 18    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 96                | 50/500               |
| 3153122         | 3151522     | Due vie con alette | 17    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,5                  | 1,15                 | 155               | 50/500               |
| 3163122         | 3161522     | Due vie con alette | 16    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,75                 | 1,35                 | 225               | 50/500               |
| 3173122         | 3171522     | Due vie con alette | 14    | 45 mm (1" 3/4)                 | 2                    | 1,55                 | 290               | 50/500               |



Neo Delta Ven 1 / Delta Ven 1 - Monovia con alette

| NEO DELTA VEN 1 | DELTA VEN 1 | DESCRIZIONE        | GAUGE | LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch) | Ø EST. CATETERE (MM) | Ø INT. CATETERE (mm) | CAPACITÀ (ml/min) | PZ. SCATOLA/ CARTONE |
|-----------------|-------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3108122         | 3106522     | Monovia con alette | 26    | 19 mm (3/4")                   | 0,64                 | 0,45                 | 19                | 50/500               |
| 3118122         | 3116522     | Monovia con alette | 24    | 19 mm (3/4")                   | 0,74                 | 0,55                 | 29                | 50/500               |
| 3128122         | 3126522     | Monovia con alette | 22    | 25 mm (1")                     | 0,9                  | 0,65                 | 42                | 50/500               |
| 3138122         | 3136522     | Monovia con alette | 20    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1                    | 0,75                 | 59                | 50/500               |
| 3188122         | 3186522     | Monovia con alette | 18    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 103               | 50/500               |
| 3148122         | 3146522     | Monovia con alette | 18    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 96                | 50/500               |
| 3168122         | 3166522     | Monovia con alette | 16    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,75                 | 1,35                 | 225               | 50/500               |
| 3178122         | 3176522     | Monovia con alette | 14    | 45 mm (1" 3/4)                 | 2                    | 1,55                 | 290               | 50/500               |



Neo Delta Ven T / Delta Ven T - Monovia

| NEO DELTA VEN T | DELTA VEN T | DESCRIZIONE | GAUGE | LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch) | Ø EST. CATETERE (MM) | Ø INT. CATETERE (mm) | CAPACITÀ (ml/min) | PZ. SCATOLA/ CARTONE |
|-----------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3108522         | 3106422     | Monovia     | 26    | 19 mm (3/4")                   | 0,64                 | 0,45                 | 19                | 50/500               |
| 3118522         | 3116422     | Monovia     | 24    | 19 mm (3/4")                   | 0,74                 | 0,55                 | 29                | 50/500               |
| 3128522         | 3126422     | Monovia     | 22    | 25 mm (1")                     | 0,9                  | 0,65                 | 42                | 50/500               |
| 3138522         | 3136422     | Monovia     | 20    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1                    | 0,75                 | 59                | 50/500               |
| 3188522         | 3186422     | Monovia     | 18    | 32 mm (1" 1/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 103               | 50/500               |
| 3148522         | 3146422     | Monovia     | 18    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,3                  | 0,95                 | 96                | 50/500               |
| 3168522         | 3166422     | Monovia     | 16    | 45 mm (1" 3/4)                 | 1,75                 | 1,35                 | 225               | 50/500               |
| 3178522         | 3176422     | Monovia     | 14    | 45 mm (1" 3/4)                 | 2                    | 1,55                 | 290               | 50/500               |

MKIVC00361 - 07/01/2025 - REV.3.0

Delta Med  
is a Numantec  
company

DELTA MED  
MEDICAL DEVICES  
Solutions for Health

medical supplies and accessories  
Securmed

PentaFerte  
MEDICAL DEVICES SOLUTIONS

D.B.M.  
INNOVATIVE  
MEDICAL DEVICES

adriamed  
EXCELLENCE IN MEDICAL DEVICES

PHS MEDICAL



NUMANTEC®  
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

CERTIFICATES:  
ISO 13485 - ISO 9001 - MDSAP 13485  
The EC Certificates for Medical Devices manufactured by  
Delta Med are issued by TÜV SÜD Product Service GmbH.

Delta Med SpA  
via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy  
Telefono: +39 0375 785915 - Fax: +39 0375 785201  
info.deltamed@numantec.eu - www.deltamed.it  
info@numantec.eu - www.numantec.eu