



GIMA

BARELLA BASKET "TWIN SHELL"

Codice: 34094

Categoria: Barella basket

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1


Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2327940

CND: V0899

EAN13: 8023279340945

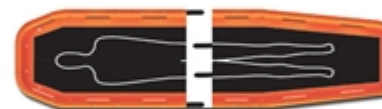

Descrizione: Robusta, resistente e flessibile, è ideale per diverse operazioni di soccorso nelle miniere, in quota e in acqua.

Una tecnica di produzione rivoluzionaria assicura uno spessore uniforme su tutta lunghezza della barella.

La scocca è in polietilene ad alta densità e si unisce ad un telaio in alluminio per migliorarne la resistenza. Le maniglie per il trasporto, sono integrate nella struttura e sono disposte lungo l'intero perimetro. I fori per il fissaggio dei moschettoni di sollevamento sono in acciaio inossidabile.

All'interno del guscio è presente un materasso rimovibile applicato con Velcro®, realizzato in EPDM, che lo rende impermeabile sia al sangue che all'acqua.

Polietilene ad alta densità infrangibile e garantisce un'ottima sanificazione.

Può contenere una tavola spinale.

Viene fornito con una corda di nylon lungo tutto il perimetro, tre cinghie di nylon di 50 mm con fibbie a sgancio rapido, resistente all'acqua, con regolatore di posizione materasso, poggiatesta in polietilene pre-formato con regolazione della posizione.

Barella basket twin shell

Può essere divisa trasversalmente a metà per un migliore stoccaggio e trasporto.

Per garantire una perfetta tenuta tra i due gusci sono stati inseriti 4 coni di nylon e un sistema di sicurezza protetto da una protuberanza inserita nel guscio stesso.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 118/215 x 64 x 19 cm
- Capacità di carico: 280 kg
- Peso: 17 kg